



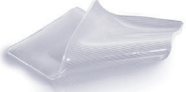

	MOLDE	REF.	UNIDADE P/EMB.	TAMAÑO	INDICACIONES
	 Placa	1240-01011	1	10 x 10 cm	Cicatrices amplias o dispersas, como las quemaduras.
	 Tira	1240-0111H 1240-0111I 1240-01112	12 1 2	30 x 2 cm 130 x 2 cm 30 x 2 cm	Cicatrices lineales como abdominoplastia, mamoplastia, cesárea, cirugía cardíaca, etc.
	 Disco	1240-01212	2	7,0 cm (diámetro)	Cicatrices areolares, tanto de reducción mamaria como de aumento mamario.
	 Coat	1230-015	1	15 g	Áreas descubiertas, como las manos, el cuello y el rostro, que no estén en contacto con la ropa.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Visite nuestro sitio web
www.silimed.com/es/medgel

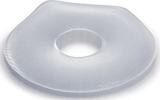

Silimed Indústria de Implantes Ltda.
Rua Figueiredo Rocha, 374
Rio de Janeiro - RJ - Brasil - CEP: 21240-660

Técnico Responsable:
Marlos de Oliveira e Souza
Químico Registro CRQ-RJ: 03230137

Fábrica Nueva
Rodovia Washington Luiz, Sítio 20 área A,
Sítio 21 área B, Vila Actura
Duque de Caxias - RJ - Brasil - CEP: 25225-015

Técnico Responsable:
Alexandre dos Santos Zago
Registro CRQ-RJ: 032053861

Registros ANVISA:
10102180037 | 10102180088

 Silimed Indústria de Implantes
 Silimed Latam  @Silimed.Latam
 Silimed  Silimed.Official
WWW.SILIMED.COM



Todos los productos Medgel* reciben el estampado de la marca Silimed durante la producción.

Con esto, Silimed ofrece más seguridad y garantía en la entrega de un producto original.

*Excepto Medgel Coat

Medgel es un producto a base de gel de silicona 100% de grado médico

Indicaciones:


Ayuda en el tratamiento y prevención de queloides, cicatrices comunes e hipertróficas, recientes o antiguas, y eritema (enrojecimiento) asociado.¹

- ✓ Biocompatible
- ✓ Flexible
- ✓ Reutilizable y con agarre suave
- ✓ Sin componentes de origen animal
- ✓ Sin ingrediente activo




MECANISMO DE ACCIÓN DE MEDGEL²

Su acción es a través de la oclusión e hidratación del área de la cicatriz ayudando al proceso de renovación y regeneración de la dermis..²

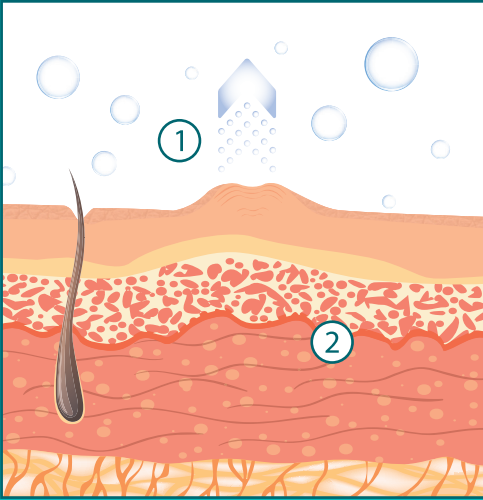


FORMACIÓN DE CICATRICES

Paso 1: Durante este proceso, el área afectada pierde exceso de agua (1), lo que provoca una producción desordenada de colágeno y células de reparación (2), lo que lleva a la aparición de la cicatriz.²

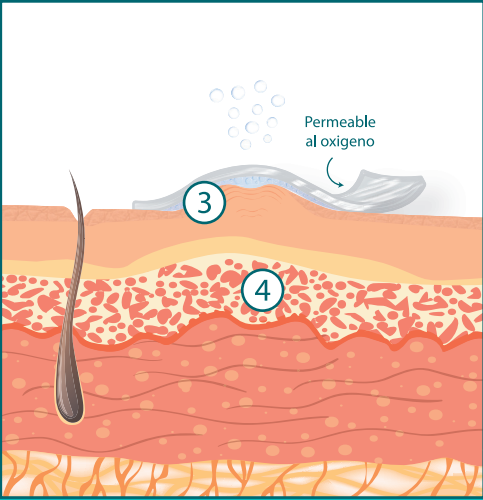

ACCIÓN DE MEDGEL

Paso 2: Las tiras de silicona, permeables al oxígeno, ayudan a la organización y regeneración de los tejidos durante la fase de remodelación de la reparación de los tejidos. Medgel promueve, a través de la oclusión de la piel (3), la hidratación de los queratinocitos epidérmicos (4), disminuyendo la expresión de citoquinas pro-inflamatorias (IL-1 β) y aumentando la expresión de citoquinas antifibróticas (TNF- α).²

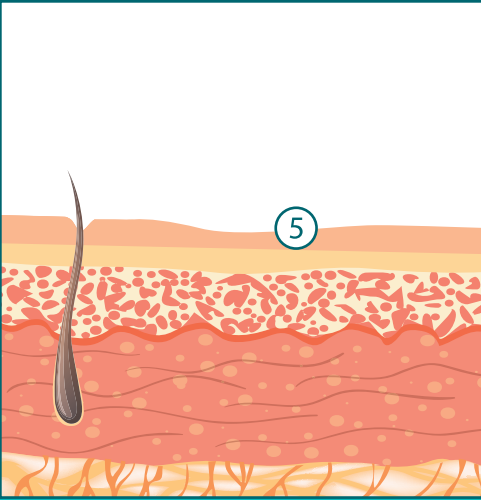

RESULTADO DE ACCIÓN

Paso 3: Estas citoquinas actúan conjuntamente alterando el comportamiento de los fibroblastos, causando la reorganización del colágeno y suavizando la cicatriz (5).²

Razones para recetar Medgel:

- 1 Es un método tópico clínicamente probado para el tratamiento de cicatrices.²
- 2 Material biocompatible, no citotóxico y no sensibilizante.
- 3 Disponible en 4 presentaciones (placa, tira, disco y gel) para adaptarse a diferentes formatos de cicatriz.
- 4 Flexible y adaptable a diferentes regiones del cuerpo.
- 5 Producto con acción autoadhesiva y adherencia suave, sin desprendimiento de la piel.
- 6 Fácilmente aplicable y extraíble sin dejar residuos de silicona debido a la alta cohesión del gel.
- 7 Reutilizable después del lavado y puede usarse hasta 20 veces sin pérdida de propiedades.
- 8 Apto para cualquier edad y para todo tipo de cicatrices, recientes o antiguas.
- 9 Mejora la apariencia de las cicatrices en 8 semanas con el uso correcto y continuo del producto^{*3}

Mejora la apariencia en hasta 8 semanas^{*3}

Antes



Después



Imagem meramente ilustrativa.

^{*}Promedio basado en estudios y con posible variación según la cicatriz, el tipo de piel y el uso del producto.

1. IUP 019-01-L-N: Medgel - Gel de Silicone para Tratamento de Cicatrizes / Medgel Coat.

2. GALLANT-BEHM CL, MUSTOE TA. OCCLUSION REGULATES EPIDERMAL CYTOKINE PRODUCTION AND INHIBITS SCAR FORMATION. WOUND REPAIR REGEN. 2010 MAR-APR;18(2):235-44.

3. AHN ST, MONAFO WW, MUSTOE TA. TOPICAL SILICONE GEL: A NEW TREATMENT FOR HYPERTROPHIC SCARS. SURGERY. 1989 OCT;106(4):781-6; DISCUSSION 786-7.