

SUBLIME

En 1958 **TRULIFE** desarrolló lo que se convertiría en la primera prótesis mamaria del mundo.

Liderando la innovación creando las formas de pecho más naturales y hermosas disponibles, porque las mujeres merecen lo mejor.

Este espíritu permanece en el corazón de todo lo que hacemos en **TRULIFE**.

Entendemos la importancia de restaurar la confianza, la autoestima que, en consecuencia, mejorar la calidad de vida de las mujeres después de la cirugía de mama.

¡LO ENTENDEMOS PORQUE ESCUCHAMOS Y HEMOS ESTADO ESCUCHANDO DURANTE MÁS DE 60 AÑOS!

Desde el principio, **TRULIFE** creó con éxito las formas mamarias más naturales, similares a la vida y todavía lo hace hoy en día.

Reconocemos que las mujeres individuales tienen necesidades individuales.

Después de la cirugía de mama, puede ser difícil adaptarse a los muchos cambios en la vida de una mujer y llegar a un acuerdo con una nueva apariencia. Trulife ha dedicado 60 años al desarrollo de productos únicos e innovadores; nuestro enfoque siempre ha sido hacer esta transición un poco más fácil y cómoda para ella.

Las formas de pecho trulife se crean en una amplia gama de formas y tamaños para complementar la belleza natural de una mujer.



SUBLIME

Estas revolucionarias formas mamarias se fabrican con silicona 100% pura y cuentan con un núcleo de panal que garantiza una transpirabilidad óptima.

El diseño de silicona pura con bordes cónicos permite que estas formas de pecho se usen directamente contra la piel para el ajuste más íntimo.

Sublime ofrece suavidad y movimiento similar al tejido mamario natural, hermosa forma y durabilidad.

151 SUBLIME ARÍS


Perfil: Tamaños medios: 3-14

- Ligero y fresco
- 100% silicona. Se puede usar directamente contra la pared torácica
- Sensación natural similar a la piel
- Incluye una cubierta de forma de pecho COOLMAX®

• Proyección completa con base más pequeña para un ajuste íntimo.

• Sutil pezón integrado grabado a mano y areola.

• Tecnología de doble capa con una capa media súper suave que imita el movimiento natural del tejido mamario y una delgada piel frontal para una sensación aún más suave y natural

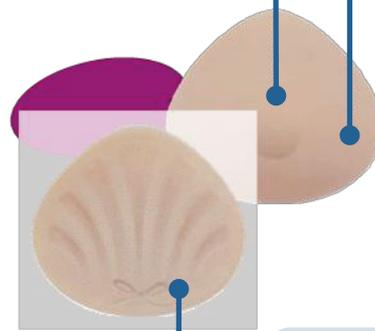

• El diseño posterior cuenta con un arco sublime femenino.



SUBLIME

CÓMO UTILIZAR ESTA GUÍA DE TAMAÑO:

1. Seleccione un tamaño de copa y siga la columna hasta donde se interseca con el tamaño adecuado de la banda del sujetador.

2. Siga esta fila a la derecha para el tamaño sugerido por producto para probar en su paciente.

(Véase el ejemplo que se resalta a continuación)

								Modelo	151	471
								Nombre	Sublime Arís	Silk
								Tamaños	3 a la 9	1 a la 17
GUÍA DE TALLAS										
PERFIL								Promedio	Sperficial a Promedio	
TAMAÑO DE LA COPA										
AA	A	B	C	D	DD	DDD	%			
TAMAÑO DEL CONTORNO. (IN/CM)										
28/60								1		
30/65	28/60							2		
32/70	30/65	28/60					3	3		
34/75	32/70	30/65	28/60				4	4		
36/80	34/75	32/70	30/65				5	5		
38/85	36/80	34/75	32/70	30/65			6	6		
40/90	38/85	36/80	34/75	32/70			7	7		
42/95	40/90	38/85	36/80	34/75	32/70		8	8		
44/100	42/95	40/90	38/85	36/80	34/75		9	9		
46/105	44/100	42/95	40/90	38/85	36/80	34/75	10	10		
48/110	46/105	44/100	42/95	40/90	38/85	36/80	11	11		
50/115	48/110	46/105	44/100	42/95	40/90	38/85	12	12		
52/120	50/115	48/110	46/105	44/100	42/95	40/90	13	13		
	52/120	50/115	48/110	46/105	44/100	42/95	14	14		
		52/120	50/115	48/110	46/105	44/100		15		
			52/120	50/115	48/110	46/105		16		
				52/120	50/115	48/110		17		

SUBLIME

PERFILES DEFINIDOS:

Poco profundo: Cortinas de tejido mamario en la copa inferior del sujetador, a menudo vistas en la mujer madura con tejido mamario blando.

CUIDADO DEL PRODUCTO

Las formas mamarias **TRULIFE** formas de senos de silicona están diseñados para ser usados por mujeres de todas las edades, con diferentes estilos de vida y tipos de cirugía.

Nuestras formas de pecho están disponibles en una amplia gama de formas, tamaños, texturas y pesos para asegurar que cada mujer pueda encontrar la forma de pecho que mejor se adapte a sus necesidades.

Un poco de cuidado y atención garantizará comodidad y satisfacción duraderas.

Promedio: Cantidades iguales de tejido mamario en la parte superior e inferior de la mama con una apariencia más redonda en la copa superior.

Completo: La apariencia más redonda, que requiere un formulario con una fuerte proyección para llenar la parte superior e inferior de la copa.

PARA LIMPIAR UNA FORMA DE SENO DE SILICONA:

1. Lave suavemente en agua tibia con un jabón suave.
2. Seque con una toalla suave, no retome ni frote.
3. Evite el uso de polvos, perfumes o agua caliente directamente en forma de pecho.
4. Se debe tener cuidado para evitar objetos afilados que puedan dañar la forma del seno.

TRULIFE distribuido en Chile por Cirumed Médica y Estética

Av. Apoquindo 6275 Oficina N° 85, Las Condes, Santiago.
Fono: +(562)-2220 6668 ● www.cirumed.cl ● ventas@cirumed.cl