


Liso Standard

El Clásico Versátil

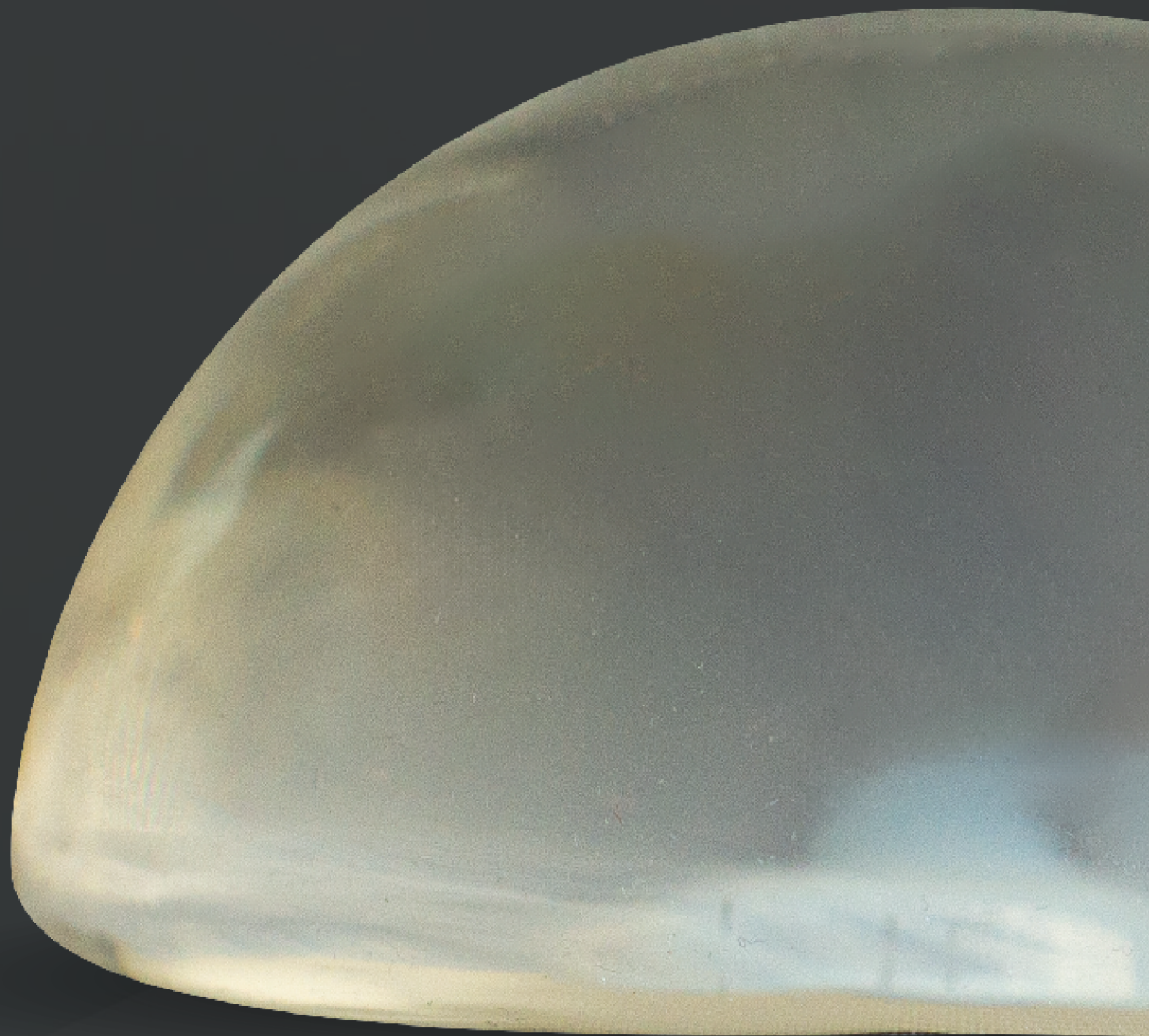


CARACTERÍSTICAS Y SEGURIDAD DEL IMPLANTE MAMARIO *Liso Standard*

Los Implantes Mamarios **Lisos Standard Silimed** tienen una membrana de elastómero de silicona mecánicamente resistente con tratamiento **low-bleed**, lo que ayuda a minimizar la ruptura y prevenir la trasudación.



Están rellenos de **Gel HSC** de **alta cohesión** y **alto rendimiento**.


El Implante Mamario **Maximum** tiene un perfil redondo y es reconocido por su gran **versatilidad en indicaciones**, como corrección y aumento mamario. Está especialmente indicado para pacientes que quieren unos **senos marcados** y **totalmente rellenos**, pero con más naturalidad.

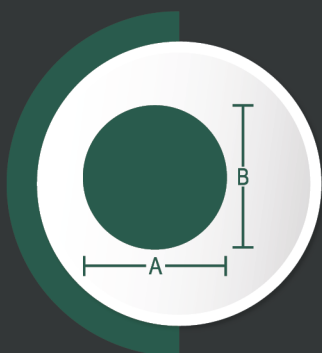

BASE REDONDA
PERFIL ESFÉRICO



PROYECCIÓN ALTA

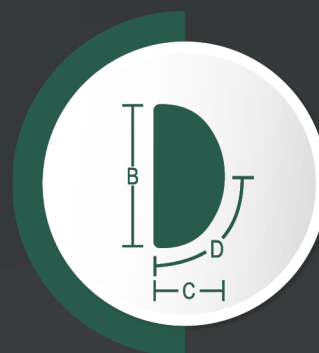

PROYECCIÓN EXTRA ALTA

Tiene una **excelente relación** proyección x base, para médicos y pacientes que quieren un **resultado más clásico**.

RENDIMIENTO DEL GEL HSC

Probado y publicado - *Plastic & Reconstructive Surgery*¹

El artículo **“Silicone Gel Breast Implants: Science and Testing”** publicado en la revista *Plastic & Reconstructive Surgery*¹ presentó un análisis comparativo del Implante Mamario Liso Redondo Silimed con sus principales competidores.

Investigaciones en laboratorios independientes realizaron pruebas, abordando no solo los componentes principales del implante, como el gel de relleno y la membrana, sino también sus propiedades colectivas como un solo dispositivo, caracterizando su desempeño en un entorno clínico, para ayudar a los cirujanos plásticos a elegir el implante que mejor se adapte a sus necesidades.



.....● Gel Cohesivo de Alto Rendimiento

●
Grado de penetración: más suave.
(Cuanto menor sea el grado medido, mayor será la consistencia del gel).

.....● Consistencia diseñada para mantener firmemente la forma del implante. Suficientemente suave para simular la sensación del tejido mamario natural.¹

Las pruebas realizadas en laboratorios independientes en los EE. UU. muestran el excelente desempeño de los Implantes Mamarios Lisos Redondos Silimed en varios aspectos:

INTEGRACIÓN

(Gel con la membrana como unidad cohesiva)

- Una mayor adherencia entre el gel y la membrana hace que el implante se comporte como una sola unidad y se requiera mayor fuerza para romperlo.¹
- En los Implantes Mamarios Lisos Redondos Silimed, la fuerza necesaria para separar la membrana del gel fue:


+35%

que los implantes mamarios redondos lisos de Mentor¹

+26%

que los implantes mamarios redondos lisos de Allergan¹

- El gel no solo actúa como un “relleno”, sino que sostiene la membrana y crea un implante firme pero elástico como una unidad integral, que simula la forma más natural de los movimientos del seno.

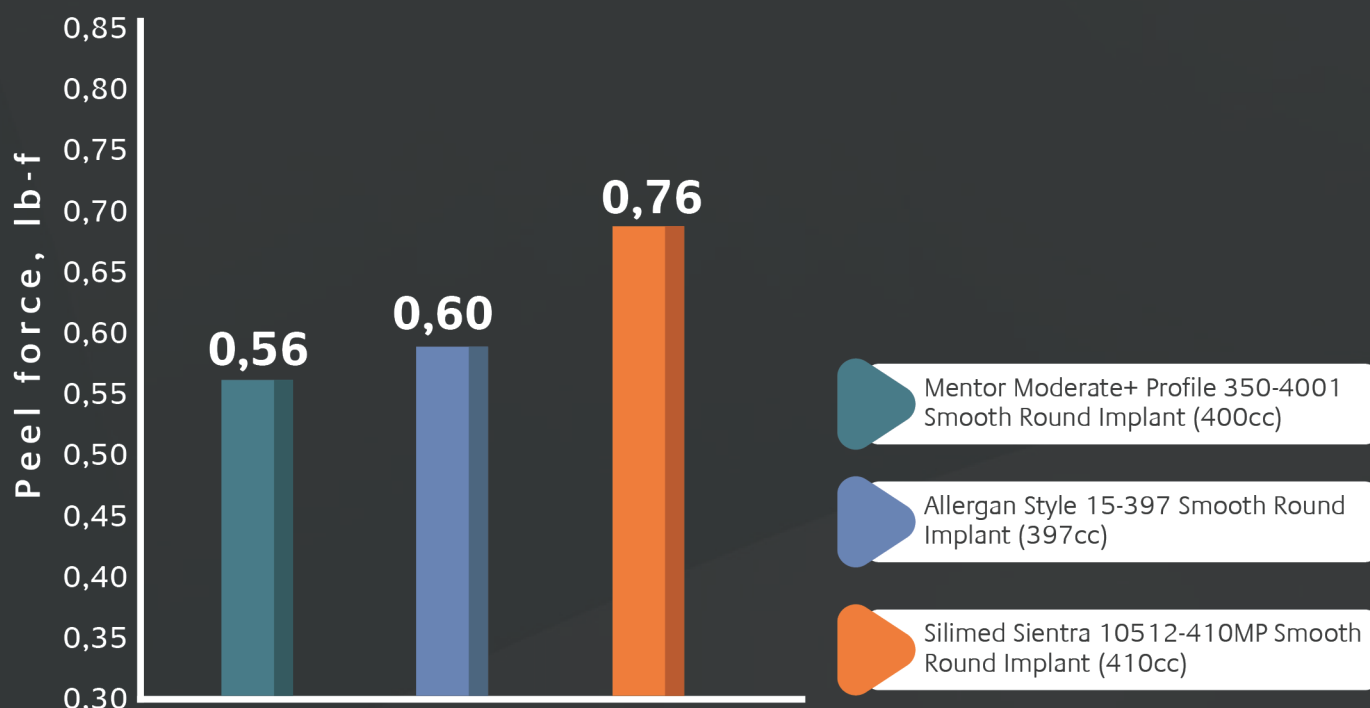

PRUEBAS

(investigaciones en laboratorios independientes)

RESISTENCIA A LA FRACTURA DEL GEL


- La prueba de fractura por compresión del gel mide la resistencia del implante, cuantificando las fuerzas que el mismo puede soportar antes de la deformidad permanente. Por lo tanto, cuanto mayor sea la fuerza de compresión soportada, mayor será la resistencia del gel a la fractura¹.
- La mayor resistencia a la fractura y ruptura del gel, encontrada en los Implantes Mamarios Lisos Redondos Silimed, es un diferencial, ya que proporciona una cohesión equilibrada, permitiendo que el implante funcione como una unidad cohesiva con la mama¹.
- Es lo suficientemente firme para mantener la forma del implante y lo suficientemente suave para simular la sensación del tejido mamario natural¹.
- El Implante Mamario Liso Redondo de Silimed presentó mayor índice de resistencia a la deformación permanente del gel, sin pérdida de flexibilidad, así:

+58%

en comparación con el
implante mamario liso y
redondo de Allergan¹

+54%

en comparación con el
implante mamario liso de
Mentor¹

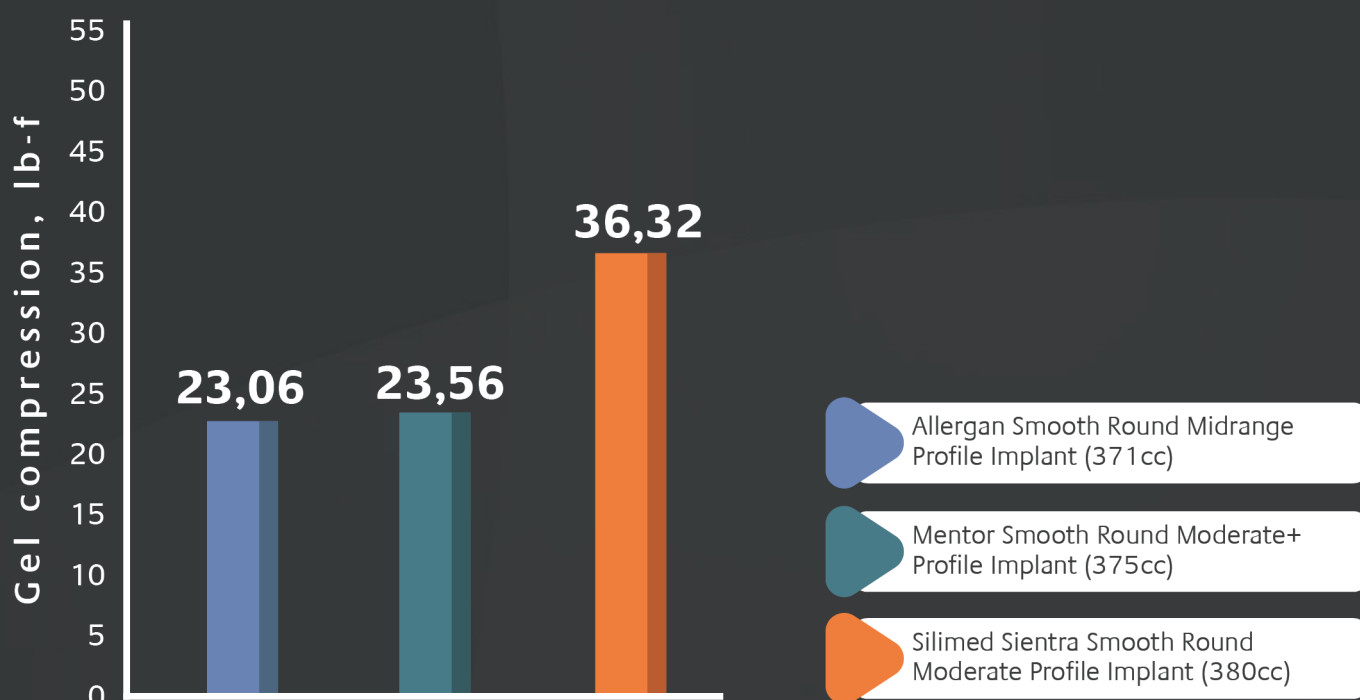

CONOCE MÁS SOBRE LOS RESULTADOS DE ESTAS PRUEBAS



El estudio presenta datos de seguridad a lo largo de **10 años²**, en los EE.UU. y enumera los principales beneficios y riesgos relacionados con los implantes mamarios de superficie lisa.

Rendimiento



Silimed Indústria de Implantes Ltda.

Rua Figueiredo Rocha, 374
Rio de Janeiro - RJ - Brasil - CEP: 21240-660
Tel: + 55 (21) 3687-7000

Técnico Responsable:

Marlos de Oliveira e Souza
Químico Registro CRQ-RJ: 03230137

Fábrica Nueva

Rodovia Washington Luiz, Sítio 20 área A,
Sítio 21 área B, Vila Actura
Duque de Caxias - RJ - Brasil - CEP: 25225-015

Técnico Responsable:

Alexandre dos Santos Zago
Registro CRQ-RJ: 032053861

SILIMED México

Teléfono: 3314286346
ventas@silimed.com.mx

Registros:

ANVISA: 10102180002

COFEPRIS: 1140C2018 SSA

Aviso de publicidad COFEPRIS:

2315112002C02612

Marca CE: 1434_MDD-083/2020

European Authorized Representative:

SILIMED B.V.

Endereço: Bond Eindhoven, luchthavenweg 81, 5657
EA Eindhoven Room 1.11C floor atrium B
silimed.bv@silimed.com.nl



Referencias: 1. Kinney BM, Jeffers LLC, Ratliff GE, Carlisle DA. Silicone gel breast implants: science and testing. Plast Reconstr Surg. 2014 Jul;134(1 Suppl):47S-56S. 2. Calobrace MB, Schwartz MR, Zeidler KR, Pittman TA, Cohen R, Stevens WG. Long-Term Safety of Textured and Smooth Breast Implants. Aesthet Surg J. 2017 Dec 13;38(1):38-48

Silimed Indústria de Implantes Silimed Latam @Silimed.Latam

Silimed Silimed.Official | WWW.SILIMED.COM

