

NPWT

TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA

La terapia de Presión Negativa (NPWT) promueve la curación en Heridas agudas y crónicas.

Además proporciona Tratamiento opcional de instilación.



NP-800 LIFOTRONIC (NPWT) SYSTEM TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA

DESCRIPCIÓN.

- **Sistema de cicatrización no invasivo**, donde se utiliza una presión negativa localizada y controlada para estimular la curación de heridas agudas y crónicas.
- La aplicación de presión subatmosférica a una herida posee **efectos de Macrotensión y Microtensión**.
- Con **opciones flexibles de capacidad y potencia de presión negativa** según necesidad del personal médico.
- **NP-800** está diseñado para una **variedad de heridas agudas, crónicas, quirúrgicas, traumáticas**.

CARACTERÍSTICAS NP/800

Rango de Presión

De -25mmhg a -500mmhg

Proporciona terapia:

Continua (modo A)
intermitente (modo B)
dinámica (Modo C)

Canister de 500ml y 1000ml

Alarmas de seguridad para:

Batería baja
Canister lleno
Linea bloqueada
Presión Alta o Baja

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Terapia de drenaje de limpieza (NP-800)

- Limpieza manual (Modo D)
- Limpieza automática, Limpieza primera (Modo E)
- Limpieza automática, Drenaje primero (Modo F)

Terapia de presión negativa con Instilación

- Reducción de la carga biológica.
- Reduce el dolor al cambio.
- Permite control de humedad en lecho de la herida.
- Permite administración de fluido terapia.



LIFOTRONIC (NPWT) SYSTEM ESPECIFICACIONES NP-800

Descripción	
Tamaño (Alto, Ancho, Profundidad)	220×260×200 mm
Peso	4.33 kg
Rango de Vacío	-25 to -500 mmHg, -25, -50, -75, -100, -125, -150..... -500
Modos disponibles	Continuo, intermitente, dinámico, limpieza manual, Limpieza automática (limpia primero), Limpieza automática (drenaje primero).
Batería	6 Horas, 5200 mAh/7.4V
Tiempo de Recarga	6 Horas
Bloqueo Automático	Sí, bloqueo de pantalla después de 10 minutos o bloqueo manual
Canister	500ml y 1000ml
Gel gelificante	sí
Monitor	Pantalla táctil digital
Filtro antibacteriano	sí
Bloqueo de Pacientes	sí
Accesorio para la cama	sí
Bluetooth	sí
Alarmas	Presión Alta / Baja, Canister lleno, Batería Baja, Finaliza el ciclo de vida de la bomba de presión negativa
Silenciador de Alarmas	sí
Entrada de Alimentación	Batería interna de iones de litio o 110-240 VCA

NP-800 LIFOTRONIC (NPWT) SYSTEM TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA

BENEFICIOS CLÍNICOS COMPROBADOS

- Terapia de heridas de presión negativa (NPWT) aumenta la cicatrización de heridas a través de mecanismos clínicos probados.
- Ayuda a promover la remisión de la herida mediante la entrega de presión negativa asistida y controlada manteniendo un ambiente húmedo que promueve la cicatrización de heridas.

EFFECTOS MACRO:

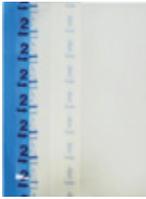
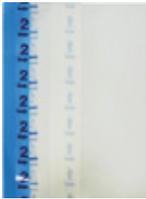
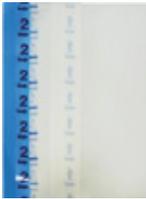
- Reduce el edema
- Elimina el exudado
- Elimina el artículo infeccioso
- Aumentos en el flujo sanguíneo a la herida
- Disminuye los márgenes de la herida

APLICABLE EN

- Úlceras diabéticas
- Úlceras/lesiones por presión
- Úlceras por insuficiencia venosa
- Heridas traumáticas
- Post cirugía
- Dehiscencia de sutura
- Injertos de piel

MICRO EFECTOS:

- Promover el crecimiento del tejido de granulación
- Aumentar la migración de fibroblastos
- Reduce la carga bacteriana
- Estimular la proliferación celular

Tipo de Producto	Espuma de Poliuretano Dimensiones		Lámina Adhesiva de poliuretano		Tipo de Drenaje	
LFTR00013 NPWT-1 (100A) NP-100/200	10*7.5*3.3cm (S) 1 Unidad		38.7*26cm 1 Unidad		1 Tubo Único de PVC (policloruro de vinilo)	
LFTR00014 NPWT-1 (180A) NP-100/200	18*12.5*3.3cm (M) 1 Unidad		38.7*26cm 2 Unidades			
LFTR00015 NPWT-1 (260A) NP-100/200	26*15*3.3cm (L) 1 Unidad		38.7*26cm 2 Unidades			
LFTR00010 NPWT-2 (100A) NP-800	10*7.5*3.3cm (S) 1 Unidad		38.7*26cm 1 Unidades			1 Tubo Doble de PVC
LFTR00011 NPWT-2 (180A) NP-800	18*12.5*3.3cm (M) 1 Unidad		38.7*26cm 2 Unidades			
LFTR00012 NPWT-2 (260A) NP-800	26*15*3.3cm (L) 1 Unidad		38.7*26cm 2 Unidades			
LFTR00007 NPWT-3 (100A) NP-800	10*7.5*3.3cm (S) 1 Unidad		38.7*26cm 2 Unidades		1 Tubo Doble con sistema de Instilación	
LFTR00008 NPWT-3 (180A) NP-800	18*12.5*3.3cm (M) 1 Unidad		38.7*26cm 2 Unidades			
LFTR00009 NPWT-3 (260A) NP-800	26*15*3.3cm (L) 1 Unidad		38.7*26cm 2 Unidades			

NP-100/200 LIFOTRONIC (NPWT) SYSTEM TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD NPWT NP-100

Con un diseño elegante y un funcionamiento silencioso, los pacientes pueden hacer un tratamiento móvil en casa cómodamente.

- Diseño elegante, pequeño y ligero
- El tamaño compacto ofrece una excelente portabilidad
- Canister integrado de 300ml
- Función de bloqueo de pantalla para evitar una operación falsa
- Tratamiento silencioso con controles fáciles de usar

CARACTERÍSTICAS NP-100/200

Rango de Presión

De -25MMHG A -200MMHG

Características del NP-100/200

Ajustes de presión:

-50 a -200mmHg

Canister: 300ml

Alarmas de seguridad:

Batería baja
Vacío alto o bajo
Canister lleno
Finaliza el ciclo de vida de la bomba de presión negativa



Canister

Estado



LIFOTRONIC (NPWT) SYSTEM ESPECIFICACIONES NP-100/200

Tamaño (Alto, Ancho, Profundidad)	60x130x160mm
Peso	0.6kg
Rango de Vacío	-50 to -200 mmHg, -50, -75, -100, -125, -150, -175, -200
Modos disponibles	Continuo, Intermitente y dinámica
Batería	12 horas, 5200mAh/7.4V
Tiempo de Recarga	6 horas
Bloqueo Automático	Sí, bloqueo de pantalla después de 10 minutos o bloqueo manual
Canister	300ml
Gel gelificante	sí
Monitor	digital
Filtro antibacteriano	sí
Bloqueo de Pacientes	sí
Accesorio para la cama	sí
Bluetooth	sí
Alarmas	Presión Alta / Baja, Canister lleno, Batería Baja, Finaliza el ciclo de vida de la bomba de presión negativa
Silenciador de Alarmas	sí
Entrada de Alimentación	Batería interna iones de litio o 110-240 VCA